



INFLUENCE DU CHARGEMENT SUR UN PORTIQUE

SUJET

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Avant de commencer les expérimentations, lisez attentivement les règles suivantes (extrait de la notice d'utilisation du banc d'essai) :

Ne pas monter ou s'asseoir sur le meuble.

Ne jamais introduire d'objet à travers les grilles et trous des moteurs ainsi que ceux du boîtier électrique.

Ne pas retirer le dispositif « anti-basculement » pendant l'utilisation ou le stockage.

Ne jamais démonter le treuil pour un autre motif qu'une opération de maintenance.

Ne jamais utiliser le treuil avec un câble complètement déroulé. Toujours garder un minimum de 2 tours de câble sur le tambour.

Ne pas retirer les goupilles de la traverse mobile lorsque le câble de treuil n'est pas complètement tendu.

Les dispositifs sur lesquels sont branchées les alimentations de l'écran, du PC, et du coffret électrique doivent être reliés à la terre et protégés par un disjoncteur différentiel.

Le coffret électrique ne doit être ouvert que par des personnes habilitées.

Les opérations de maintenance et de contrôles doivent également être effectuées par des personnes habilitées.

Ne pas déplacer les vérins trop brusquement aux extrémités de la traverse mobile ou poutre verticale : cela pourrait endommager le boîtier du conditionneur qui viendrait alors en butée contre une vis.

Les supports magnétiques des capteurs de déplacement ne doivent être aimantés que sur les règles inférieures et latérales gauches, en aucun cas sur les fines platines où coulisent les vérins.



OBJECTIFS DU TP

Mettre en évidence l'influence de l'orientation de la charge (verticale ou horizontale) sur un portique.

APPAREILLAGE

Le dispositif d'essai mis à disposition se compose :

- D'un châssis mécano assemblé de type portique en acier haute résistance monté sur un meuble à roulettes ;
- D'une traverse à hauteur réglable avec blocage à goupilles ;
- De deux vérins électriques (un pour le chargement vertical et un autre pour le chargement horizontal) de capacité 1kN équipés d'un appui ponctuel amovible avec capteur de force et de déplacement ;
- D'un capteur de déplacement externe ;
- D'un ordinateur permettant la commande du chargement, le pilotage, l'acquisition et le stockage des données.

DEROULEMENT DU TP

Afin de déterminer l'influence des différentes charges appliquées à un portique, nous étudierons grâce au Banc d'Essai Didactique, le cas d'un portique sollicité par une charge verticale puis par une charge horizontale avant de combiner les deux. Il s'agira ensuite de comparer les résultats obtenus afin de conclure sur l'influence des charges.

PROTOCOLE GENERAL

Description du banc d'essai :



Mise en marche du banc d'essai :

Placer le sectionneur à l'arrière du coffret électrique en position I.

Appuyer sur le bouton vert sur la face avant du coffret électrique (« sous tension ») : il s'allume.

Le voyant « en service » du boîtier de commande s'allume également.

Allumer seulement ensuite le PC et démarrer la session LABORATOIRE.

Le banc est prêt à être utilisé.


Mise en place du portique :

Pour le réglage du treuil et de la traverse, faire appel un professeur.


Ouvrir le fichier : 3R → produit → statique → portique



Placer les appuis sur le banc d'essai

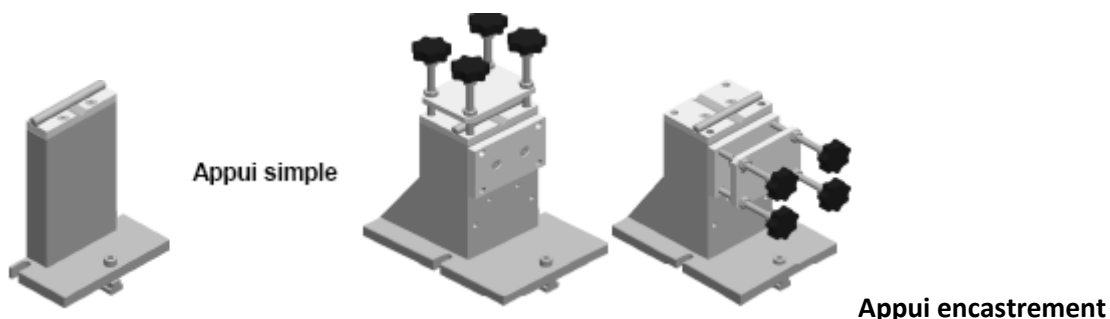

Installer le portique.

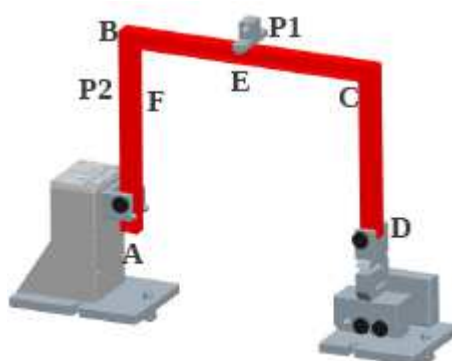

Placez les vérins au point d'application de la charge à l'aide des vis de blocage. Les touches MARCHE +F5, F6, F7 ou F8 permettent d'approcher le vérin de la structure. Le voyant orange " en charge " s'allume lorsque la force appliquée dépasse le seuil de sécurité

Utilisation de l'interface :

Choisir le mode AUTO sur le boîtier de commande

Sur l'ordinateur, cliquez sur ENREGISTRER

Entrez le nom de l'essai

Confirmer ASSERVISSEMENT → Force

Cliquez sur DEPART

Le test est prêt à être lancé

Appuyer en continu sur le bouton MARCHE du boîtier de commande pendant tout le test jusqu'à ce que le voyant orange s'allume.

Le test est terminé



Cliquez sur ANALYSE, l'ordinateur envoie directement les tests sur Excel.


Enregistrez le fichier Excel contenant la courbe et le schéma mécanique.

Revenir sur la fenêtre d'essai 3R.

Mettre le mode MANU sur le boîtier de commande et décharger en appuyant sur les touches MARCHE + F5, F6, F7 ou F8.

PREMIERE PARTIE : APPLICATION D'UNE CHARGE VERTICALE EN MILIEU DE TRAVERSE

- Schéma mécanique :

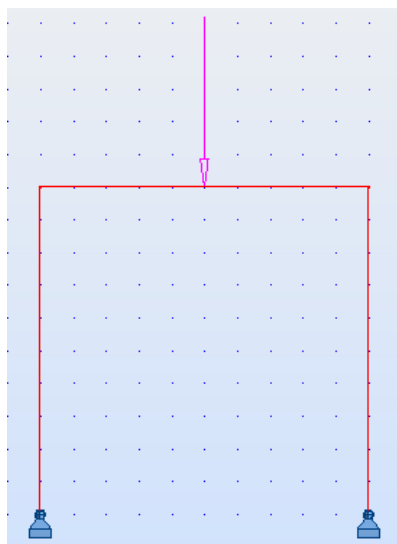

Q1 : Calculer le Degré d'Hyperstaticité du portique.

Q2 : Déterminer la section A et le moment quadratique I du profilé.

Q3 : Rechercher le module d'Young du profilé.

- Analyse des résultats:


La charge appliquée en milieu de traverse est de 500N.

Q4 : Déterminer les réactions d'appuis en A et D.

Q5 : Déterminer expérimentalement la valeur maximale de flèche et sa position. En connaissant la position de l'effort, tracer l'allure de la déformée du portique.

DEUXIEME PARTIE : APPLICATION D'UNE CHARGE HORIZONTALE EN TETE DE POTEAU

- Schéma mécanique :

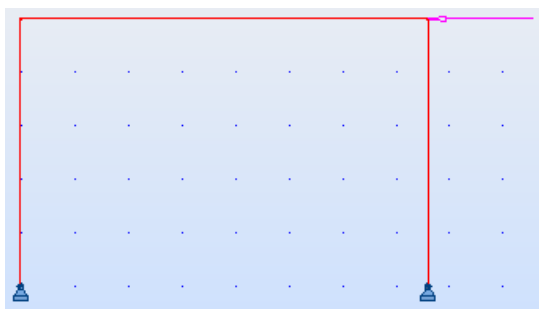

- Analyse des résultats :

La charge appliquée en tête de poteau est de 400N.

Q6 : Déterminer les réactions d'appuis en A et D.

Q7: En connaissant la position de l'effort, déterminer la valeur maximale de la flèche et sa position.
Tracer l'allure de la déformée du portique.

CONCLUSION

Q8 : D'après les observations effectuées, à quels endroits pensez-vous que le portique sera le plus sollicité en fonction du type de chargement appliqué ?